

# 高圧ホモジナイザー

DJÖNING  
JAPAN

株式会社日本ドニン

## 多様なアプリケーション

Food & Drink



Pharma/Biopharma



Cosmetics



Chemical/Materials



## 国際基準の 品質マネジメント




## AH-NANO (ラボ向け機種)

- 流量：5 – 10 L/h
- 圧力：1,500 bar
- 10 mLサンプルから使用可能
- 機器サイズ (mm)：790×450×490
- 機器重量：158 kg
- 希望小売価格：¥4,500,000

大型機もございます お問い合わせください

## 特許取得冷却システム


- 循環水による冷却
- 変性させずに処理可能
- 冷却器は機器に付属

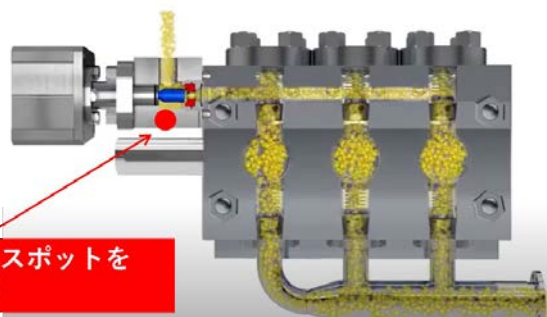

破碎ホットスポットを  
中心に冷却

## アプリケーション例

- サンプル：酵母 (*P. Pastoris*)
- 1,400 bar x4回処理
- >95%の破碎効率

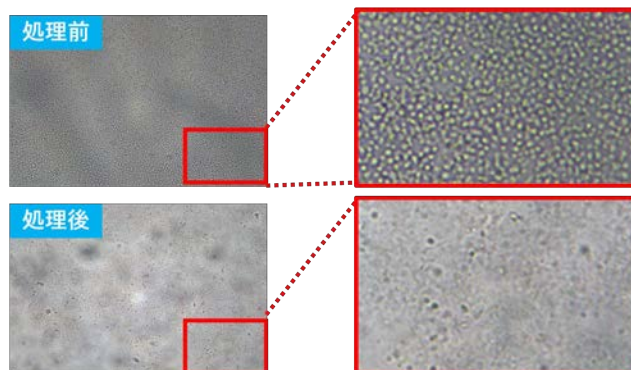

海外ユーザー例：



Cornell University

TEXAS A&M  
UNIVERSITY



HUAWEI

その他、5000施設を超える導入実績

### ■ お問い合わせ先



株式会社日本ドニン

〒103-0012  
東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-10  
日本橋ライフサイエンスビル7  
TEL：03-6661-7918